


# TRIANGO 60



## Die Kompakte, die hat was es braucht. TRIANGO 60

Seit Sommer 2023 bereichert die TRIANGO 60 das Leuchten-Sortiment für kleine OPs und Behandlungen. Auffällig ist ihr minimalistisches Design. Dank intuitivem Taster kann die Beleuchtungsstärke von 60 000 Lux auf 1m stufenlos angepasst werden. Sie eignet sich für den vielseitigen Alltag in Hausarztpraxen und Kliniken sowie in der Gynäkologie, Proktologie, Dermatologie oder Tiermedizin.

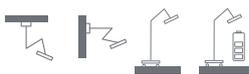

TRIANGO 60	technische Daten
Lichtleistung *	60 000 Lux @ 1.0 m
Farbtemperatur *	ca. 4 700 K
Beleuchtungsfeld @ 1.0 m *	Ø 18 cm
Ausleuchtungstiefe *	140 cm
Farbwiedergabe *	Ra > 95
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf) IP 20 (USVmed Pack)

Besonderheiten	
<b>TRIANGO 60-1</b>	stufenlos dimmbar (15-100%) *
<b>TRIANGO 60-3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stufenlos dimmbar (15-100%) *</li> <li>• 3 Farbtemperaturen</li> </ul>
<b>TRIANGO Fokus 60-1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stufenlos dimmbar (15-100%) *</li> <li>• fokussierbar</li> </ul>
<b>Befestigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decke</li> <li>• Wand</li> <li>• Rollstativ</li> <li>• Rollstativ USVmed Pack</li> </ul>

# TRIANGO 60 – Varianten



TRIANGO 60 C Deckenversion



TRIANGO 60 W Wandversion



TRIANGO 60 F Rollstativ



TRIANGO 60 F Battery



### Variable Anbindungsoptionen

Ob an der Decke, an der Wand oder mobil auf dem Derungs Rollstativ – die TRIANGO 60 ist überall einsetzbar, wo ihr homogenes Lichtfeld benötigt wird. Und bei Störungen im Stromnetz sorgt die TRIANGO 60 Battery für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, damit sie weiterleuchten kann.

### Hygiene einfach gemacht

Gutes Design verzichtet auf unnötige Details und legt Wert auf möglichst geschlossene Baukörper. Der Nutzen daraus ist, dass unsere TRIANGO 60 sehr schnell und effektiv zu reinigen sind. Ein echtes Plus im Praxisalltag.

## Produkthighlights

### Vielseitig einsetzbar

Versionen mit fokussierbarem oder farbveränderbarem Beleuchtungsfeld

### Homogenes Lichtfeld

einzigartige Diamantoptik

### Einfaches Reinigen

reduzierte Formgebung und abnehmbarer, sterilisierbarer Handgriff



### Ergonomisches Handling

einfaches Ausrichten für Rechts- und Linkshänder



### Intuitives Bedienen

dank Taster an der Kardanik